


## Schutz für Ihre Laboratmosphäre

- ✓ Sichere Lagerung von korrosiven, nicht entzündbaren Gefahrstoffen, Säuren und Laugen getrennt
- ✓ Schrankkorpusse und Auszugswannen aus widerstandsfähigem Polypropylen
- ✓ Flüssigkeitsdichte Schubkästen auf leichtlaufenden PTFE-Streifen mit Auszugsstopp
- ✓ Abführen aggressiver Dämpfe durch Anschluss an das Abluftsystem
- ✓ Korrosionsunempfindliche Schlösser und Scharniere
- ✓ Ideal als Unterbau von Abrauchabzügen



Hochschränke

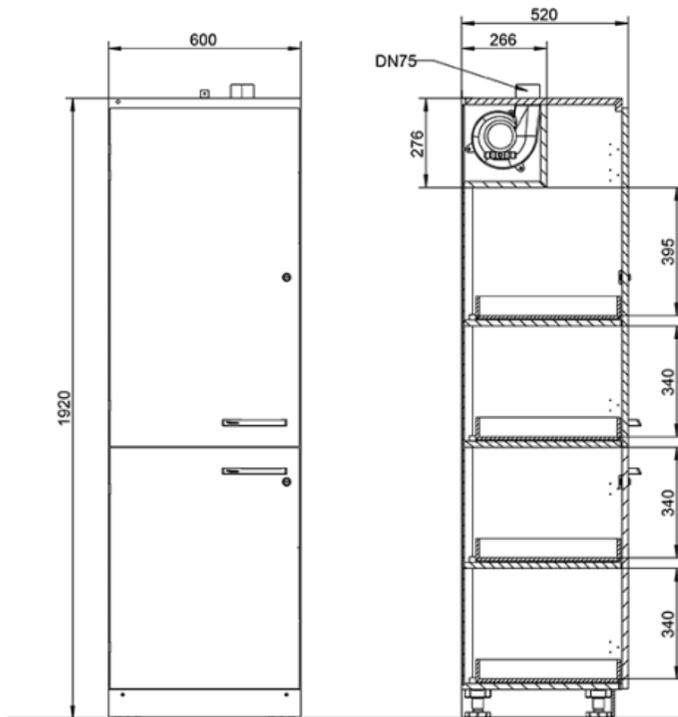


|                                  | Breite |     |   | Höhe | Tiefe | Auszüge |
|----------------------------------|--------|-----|---|------|-------|---------|
| Hochschränke, 1 Tür links/rechts | -      | 600 | - | 1920 | 520   | 4       |

Abmessungen in mm

Unterschränke

|   | Breite |     |     |      |      |      | Höhe | Tiefe | Auszüge |
|---|--------|-----|-----|------|------|------|------|-------|---------|
| Unterschränke,<br>1 Tür links/rechts              | 450    | 600 | -   | -    | -    | -    | 720  | 520   | 2       |
| Unterschränke,<br>2 Türen                         | -      | -   | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 720  | 520   | 3/ 4*   |
| Unterschränke für Kanister,<br>1 Tür links/rechts | 450    | 600 | -   | -    | -    | -    | 720  | 520   | 1       |
| Unterschränke für Kanister,<br>2 Türen            | -      | -   | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 720  | 520   | 3       |

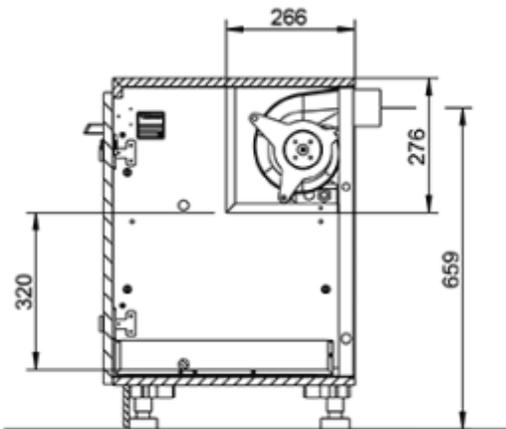

Abmessungen in mm